

**Loro
Dent**



CATALOGO

HT	ST	UT	SHT	3D Pro	3D Prism	Swiftgo
37% Traslucides 1350 MPa	41% Traslucides 1200 MPa	49% Traslucides 700 MPa	46% Traslucides 1100 MPa	43%-57% Traslucides 700-1050 MPa	43%-57% Traslucides 700-1200MPa	43%-53% Traslucides 700-1050MPa

Blanco



Pre coloreado



Multicapas



Indicaciones		HT	ST	UT	ST color	SHT ML	UT ML	3D Pro	3D Prism
Cofias		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coronas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puente 3-4 unidades		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puente de 5-6 unidades		✓	✓		✓	✓		✓	✓
Puente 7 unidades		✓	✓		✓	✓		✓	✓
Puente voladizo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puente con incrustaciones		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puente Maryland		✓	✓		✓	✓			✓
Corona telescópica		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pilares		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Recomendado

✓ Se puede hacer, mas no es recomendado

Vsmile HappyZir 3D Prism Multilayer

Indicaciones



Cofias



Puente



Coronas



Inlay & Onlay




Pilares



> 7 unidades



Carillas

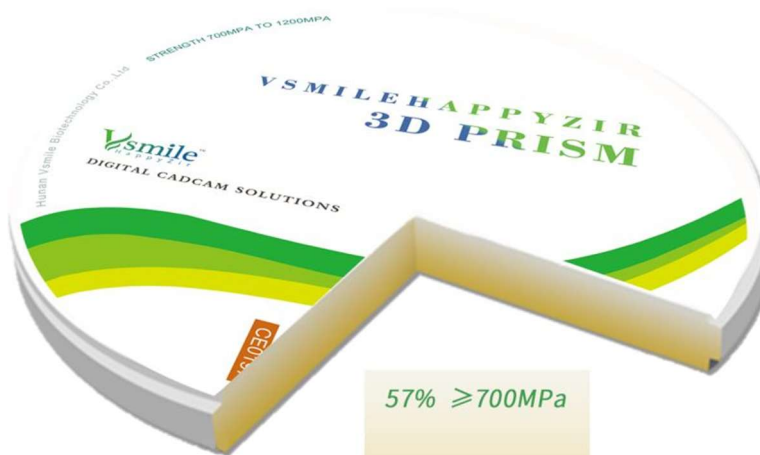

57% $\geq 700\text{MPa}$

↑ 9 layers gradient ↑

43% $\geq 1200\text{MPa}$

Dimensiones		Altura	10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm/30mm
Traslucidez	57% - 43%	Color	 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 BL1 BL2 BL3 BL4
Fuerza	700Mpa – 1200MPa	Temperatura recomendada	1500°C
Especificaciones	9 capas de color - Adecuado para dientes anteriores, coronas y puentes largos de hasta 12 unidades		

Vsmile HappyZir 3D Pro Multilayer



Indicaciones



Cofias



Puente



Coronas



Inlay & Onlay



Pilares



≤ 7 unidades



Carillas

Dimensiones		Altura	10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/ 20mm/22mm/25mm/30mm
Traslucidez	57% - 43%	Color	 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 BL1 BL2 BL3 BL4
Fuerza	700Mpa – 1050MPa	Temperatura recomendada	1500°C
Especificaciones	- Altamente estético - Adecuado para dientes anteriores, coronas y puentes largos de hasta 6 unidades		

Vsmile HappyZir

SHT Multilayer

Indicaciones



Dimensiones		Altura	10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/ 20mm/22mm/25mm
Traslucidez	46%	Color	 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4  BL1 BL2 BL3 BL4
Fuerza	1100MPa	Temperatura recomendada	1500°C
Especificaciones	• Multicapas • No es necesario colorear • Adecuado para dientes anteriores, coronas y puentes		

Vsmile HappyZir ST White

Indicaciones



Cofias



Punte



Coronas



Inlay & Onlay



Pilares



≤ 14 unidades

Dimensiones		Altura	10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/ 20mm/22mm/25mm/30mm
Traslucidez	41%	Color	White
Fuerza	1200MPa	Temperatura recomendada	1480°C-1530°C
Especificaciones	• Aplicaciones monolíticas • Contorno completo / corona completa • Puentes • Super translucidas		

Vsmile HappyZir ST Preshaded

Indicaciones



Dimensiones		Altura	10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm
Traslucidez	41%	Color	 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Fuerza	1200MPa	Temperatura recomendada	1480°C-1530°C
Especificaciones	• Aplicaciones monolíticas • Contorno completo / corona completa • Puentes • Super translucidas • 16 colores Vita disponibles, no necesita coloración		

Vsmile HappyZir ST Multilayer



Indicaciones



Dimensiones		Altura	10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/ 20mm/22mm/25mm
Traslucidez	41%	Color	
Fuerza	1200MPa	Temperatura recomendada	1480°C-1530°C
Especificaciones	- Buena resistencia al envejecimiento y biocompatibilidad - Alto efecto estético - Degradado de colores - Transición de color natural - Disponible en 16 colores vita + 4 bleach		

Vsmile HappyZir

UT Multilayer



Indicaciones



Cofias



Puentes



Coronas



Inlay & Onlay



Pilares

Dimensiones		Altura	10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm
Traslucidez	49%	Color	
Fuerza	700MPa	Temperatura recomendada	1480°C-1530°C
Especificaciones	- Buena resistencia al envejecimiento y biocompatibilidad - Degradado de colores - Transición de color natural - Disponible en 16 colores vita + white		

Vsmile HappyZir

SwiftGo



Indicaciones



Dimensiones		Altura	10mm/12mm/14mm/16mm/18mm/ 20mm/22mm/25mm
Traslucidez	53%-43%	Color	
Fuerza	700-1050MPa	Temperatura recomendada	15300°C-1550°C
Especificaciones	• Velocidad y eficiencia superiores que minimizan el tiempo de sinterización • 1 corona hasta puente de 3 unidades en 2 horas • Degradado de colores • Disponible en 16 colores vita + 3 OM		

Disco PMMA

Disco de poli metacrilato de metilo, material termoplástico que se utiliza a menudo como alternativa a la vitrocerámica.

Esta diseñado principalmente para la producción de restauraciones temporales de larga o corta duración.



	Tamaño	16 colores Vita + 4 de blanqueamiento
Multicapa	10mm/12mm/ 14mm/16mm/ 18mm/20mm/ 22mm/25mm/ 30mm	



	Tamaño	Colores disponibles
Monocapa	10mm/12mm/ 14mm/16mm/ 18mm/20mm/ 22mm/25mm/ 30mm	    Rosa Transparente Doble capa

Disco PEEK

Disco de polieter eter cetona: el polímero inteligente de alto rendimiento.

Vsmile Peek, con su combinación ideal de biocompatibilidad y máxima capacidad de carga es la solución premium para el equilibrio biológico de la base de la dentadura postiza el material de restauración.

La calidad medica comprobada utilizada como material Endo protésico quirúrgico confiable es actualmente el material CAD/CAM dental más interesante para la fabricación de productos de alta gama. Fabricado mediante un proceso de producción controlado industrialmente con una alta calidad constante.



Tamaño	Color
12mm/ 14mm/16mm	*Amarillo
18mm/ 20mm/22mm	*Blanco
25mm/ 30mm	*Natural
	*Rosa

Disco de cera


El disco de cera Vsmile se pueden utilizar para producir eficientemente diseños de cera para estructuras de coronas y puentes, cada uno con excelente precisión de margen y ajuste. Dado que se quema sin dejar residuos, es adecuado para la preparación de moldes para procesos de fundición y moldeo cerámico. Utilizando este material los técnicos crean patrones para restauraciones de contorno completo o de cerámica prensada y encerados de diagnósticos





Tamaño	Color
10mm/ 12mm/14mm/	*Azul
16mm 18mm/20mm/	*Blanco
22mm/ 25mm	*Gris
	*Verde

Accesorios

Fresas para equipos CAD CAM

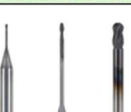Equipo	DC / Recubrimiento diamantado Zirconia	DLC Zirconia, PMMA, Cera	Emax	PMMA/Cera/PEEK	Metal
					
Amann *47	0.6 / 1.0 / 2.5mm	0.3 / 0.6 / 1.0 / 2.5mm			
					
Cerec 3					
					
ONE / 150i / 250i					
Imes Icore D3	0.6 / 1.0 / 2.5mm	0.6 / 1.0 / 2.5mm	0.6 / 1.0 / 2.5mm	0.6 / 1.0 / 2.5mm	
					
350i / 450i / 650i	0.6 / 1.0 / 2.5mm		0.6 / 1.0 / 2.5mm	0.6 / 1.0 / 2.5mm	
Imes Icore D6					
					T62 T63 T64 T67 T68 T69 T80 T81
					
Roland	0.3 / 0.6 / 1.0 / 2.0mm	0.3 / 0.6 / 1.0 / 2.0mm	0.6 / 1.0 / 2.5mm	0.6 / 1.0 / 2.5mm	
					
Sirona MCx5	0.5 / 1.0 / 2.5mm	0.5 / 1.0 / 2.5mm			
					
Sirona MCXL					

Equipo	DC / Recubrimiento diamantado	DLC	Emax	PMMA/Cera/PEEK	Metal
	Zirconia	Zirconia, PMMA, Cera			
					
UP3D	0.6 / 1.0 / 2.0 mm				
K1 / K2 / K4 / N4 / N4+ / Z4					
VHF *35	0.6 / 1.0 / 2.0 mm	0.6 / 1.0 / 2.0 mm			
K5 / R5 / S1 / S2					
VHF *40	0.6 / 1.0 / 2.0 mm	0.6 / 1.0 / 2.0 mm			
Select					
Wieland *40	0.7 / 1.0 / 2.5mm	0.7 / 1.0 / 2.5mm	0.5 / 1.0 / 2.0 / 3.0 mm		
Mini					
Wieland *35		0.7 / 1.0 / 2.5mm			

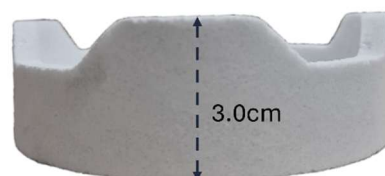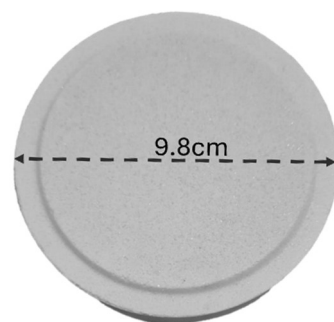

Bandeja circular para horno de sinterizado

Medida: 9.8cm diámetro externo
8.0cm diámetro interno
3.0cm altura



Perlas para sinterizar 2 ø


Presentación:

- Frasco 1 lb
- Frasco ½ Lb
- Bolsa de 40gr

Recuerda cambiar las perlas cuando comiencen a pigmentarse

Filtro HEPA

Compatible con iVac Imes icore y
BOFA de Roland

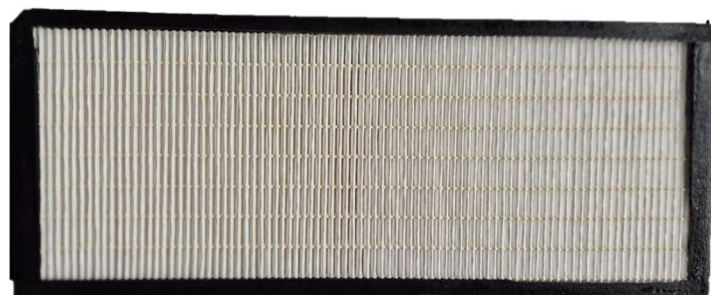

Bolsa de tela

Compatible con iVac Imes icore y
BOFA de Roland

Spray para escaneo de última generación

- Recubrimiento fino y homogéneo
- Libre de pigmentos
- No requiere limpieza
- Bote con 400ml

Utiliza una capa ligera a 20 cm de distancia para un acabado perfecto



	HappyZir	Luminous	SmileZir	Fully Cristalized
				
Tamaño	C14 / B40	C14 / B40	C14 / B40	C14
Traslucides	HT / LT	HT / LT	HT / LT	HT / LT
Resistencia flexural	400+-50 Mpa	420 +-50Mpa	350 +-50 Mpa	250+- 30 Mpa
Temperatura max	820°C	850°C	840°C	N/A

	Marca	Tam	Traslucides	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL1	BL2	BL3	BL4	OM1	OM2	OM3	OM3+	
	HappyZir	C14	HT																									
			LT																									
		B40	HT																									
			LT																									
	SmileZir	C14	HT					x			x	x			x	x	x	x	x									
			LT					x							x	x		x	x									
		B40	HT					x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	
			LT					x				x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	
	Luminous	C14	HT																									
			LT																									
		B40	HT				x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			LT				x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
	Luminous (Amber)	C14	HT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	
	Fully-Crystallized	C14	HT				x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x									
			LT				x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x									

“X” colores no disponibles

Disilicato de litio HappyZir



Fresado rápido y cristalización simple

- Fuerza flexural 400+- 50 Mpa
- Tamaño: C14 y B40
- Translucides: HT y LT
- Disponible en los tonos: 16 tonos vita + 4 bleach

Después de teñir y glasear cumpla estrictamente el programa de sinterizado:

Temperatura de inicio	Secado	Velocidad	Temperatura max	Tiempo de mantenimiento	Temperatura final
500°C	4 min	50°C / min	820°C	2 min	300° C

Parámetros de rendimiento

CTE (25-500°C)	Resistencia a la flexión después de la sinterización Mpa	Solubilidad química después de la sinterización (ug/cm2)	Densidad (g/cm3)
10.5 +- 0.5	400 +- 50	<40	2.47 +- 0.05

Todos los colores disponibles

	Marca	Tam	Translucide s	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL1	BL2	BL3	BL4	OM1	OM2	OM3	OM3+
	HappyZir	C14	HT																								
			LT																								
		B40	HT																								
			LT																								

Disilicato de litio Luminous



Disilicato luminoso de alta gama

- Fuerza flexural 420+- 50 Mpa
- Tamaño: C14
- Translucidos: HT y LT
- Disponible en los tonos: 16 tonos vita + 4 bleach, Aquamarine y Violet Crystal

Tabla de sinterizado:

HT OM2, LT OM3 Y especiales HT OM1 y OM2 (Aquamarine y Violet crystal)

Temperatura de inicio	Tiempo de mantenimiento	Velocidad	Temperatura max	Tiempo de mantenimiento	Temperatura final
450°C	2 min	30°C / min	827°C	4 min	Enfriar por aire

Colores A-D, HT y LT

Temperatura de inicio	Tiempo de mantenimiento	Velocidad	Temperatura max	Tiempo de mantenimiento	Temperatura final
450°C	2 min	30°C / min	850°C	7 min	Enfriar por aire

Glazeado:

Si es necesario realizar un glaseado por segunda vez, el procedimiento de glaseado será:

HT OM2, LT OM3 Y especiales HT OM1 y OM2 (Aquamarine y Violet crystal)

Temperatura de inicio	Tiempo de mantenimiento	Velocidad	Temperatura max	Tiempo de mantenimiento	Temperatura final
450°C	2 min	50°C / min	800°C	2 min	Enfriar por aire

Colores A-D, HT y LT

Temperatura de inicio	Tiempo de mantenimiento	Velocidad	Temperatura max	Tiempo de mantenimiento	Temperatura final
450°C	2 min	50°C / min	840°C	2 min	Enfriar por aire

Colores disponibles:

	Marca	Tam	Translucides	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL1	BL2	BL3	BL4	OM1	OM2	OM3	OM3+
	Luminous	C14	HT																								
			LT																								
		B40	HT				x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			LT				x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
	Luminous (Amber)	C14	HT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x

“X” colores no disponibles

Disilicato de litio Smile Zir



El disilicato que libera la belleza de las sonrisas

- Fuerza flexural 350+- 50 Mpa
- Tamaño: C14 y B40
- Translucides: HT y LT
- Disponible en los tonos: Puede variar según tamaño y translucides

Tabla de sinterizado:

Temperatura de inicio	Secado	Velocidad	Temperatura mas alta	Tiempo de mantenimiento	Temperatura de apertura	Inicio de vaciado	Termino de vaciado
400°C	3 min	40°C / min	840° C	7 min	700°C	550°C	840° C

*Evite el aire acondicionado directo o los ventiladores para evitar fracturas o grietas causado por el enfriamiento rápido

Colores disponibles:

	Marca	Tam	Translucides	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL1	BL2	BL3	BL4	OM1	OM2	OM3	OM3+
	SmileZir	C14	HT					x			x	x			x	x	x	x	x								
			LT					x							x	x		x	x								
		B40	HT					x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	
			LT					x			x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	

"X" colores no disponibles

Disilicato de litio Luminous Fully Cristalized



Disilicato de litio totalmente cristalizado

- Fuerza flexural 250+- 30 Mpa
- Tamaño: C14
- Translucides: HT y LT
- Disponible en los tonos: A1, A2, A3, B1, B2, bleach y OM

-No requiere cocción

-Ideal para clínica

-Diseña, fresa, pule y cementa

-Trabajos en menos de 40 minutos

Colores disponibles:

	Marca	Tam	Translucides	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL1	BL2	BL3	BL4	OM1	OM2	OM3	OM3+
	Fully-Crystallized	C14	HT				x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x								
			LT				x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x								

"X" colores no disponibles

Disilicato de litio para prensar HappyZir

Vitrocerámica de disilicato de litio de primera calidad para la técnica de prensado.

- Tamaño 13*10mm
- Peso 2.97 3.02g
- Densidad 2.48g/cm
- Fuerza flexible 320 MPA
- Dureza Vickers 560 MPA

Caja con 5 pastillas.

Disponible en 16 colores Vita + 4 bleach en translucides HT y LT



Curva de fundición a presión <100gr

	Temperatura de inicio	Tiempo de secado	Temperatura max	Mantenimiento de temperatura	Tiempo de presión
HT	700°C	50°C / min	930°C	15 min	3 min
LT	700°C	50°C / min	915°C	15 min	3 min

Curva de fundición a presión de 101gr a 200gr

	Temperatura de inicio	Tiempo de secado	Temperatura max	Mantenimiento de temperatura	Tiempo de presión
HT	700°C	50°C / min	930°C	20 min	5 min
LT	700°C	50°C / min	915°C	20 min	5 min

Colores disponibles:

	Marca	Translucides	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL1	BL2	BL3	BL4
	HappyZir	HT																				
		LT																				

Disilicato de litio para prensar Smile Zir

Vitrocerámica de disilicato de litio de primera calidad para la técnica de prensado con un manejo más fácil y fluido para un terminado superior.

- Caja con 5 y 10 pastillas
- Variedad de colores



Curva de fundición a presión 100gr

	Temperatura de inicio	Tiempo de secado	Temperatura max	Mantenimiento de temperatura	Tiempo de presión	Inicio de vacío
HT	700°C	60°C / min	905°C	15 min	3 mint	700°C
LT	700°C	60°C / min	910°C	15 min	3 mint	700°C

Colores disponibles:

	Marca	Translucides	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BL1	BL2	BL3	BL4
	Smile Zir	HT								x	x			x	x	x	x	x				
		LT								x	x			x	x	x	x	x				

“X” colores no disponibles

COMPUESTO NANOHÍBRIDO

Discos

Los bloques híbridos Evolux están indicados para restauraciones Inlays, Onlays, coronas completas para dientes anteriores y posteriores, restauraciones implantosoportadas y carillas cosméticas.

Composición:

Matriz de resina polimérica:

(Resina de bisacrílico - Polímero 55%-60%)

**Metilmetacrilato*

**Diacrilato*

**Peróxido de dibenzoilo*

**TEGMA*

**Carboximetilcelulosa*

Nanopartículas de vidrio inorgánico silanizadas 40% - 45%

**Alúmina*

**Polisiloxano*

**Dióxido de silicio*

Pigmentos 0,5% – 1%

Características:

**Composite*

**Colores estables*

**Multicapa*

**Sin burbujas ni porosidades*

**Biocompatible*

**Fluorescencia*

**Alta resistencia a la flexión*


**Resistencia al desgaste excepcional*

**Estética realista con opalescencia natural*

**Resistencia a la abrasión*

<i>Elasticidad</i>	$>8 \text{ GPa}$
<i>Absorción de agua ISO 10447</i>	$< 22 \mu\text{g}/\text{mm}^3$
<i>Solubilidad en agua</i>	$> 0,65 \mu\text{g}/\text{mm}^3$
<i>Resistencia a la flexión ISO 6872</i>	$> 157 \text{ MPA}$

IMPORTANTE: Para fresar los bloques en sistema CAD/CAM sin sistema de irrigación, utilizar máximo 19.0000 RPM para evitar quemar los bloques e incluso dañar las herramientas.

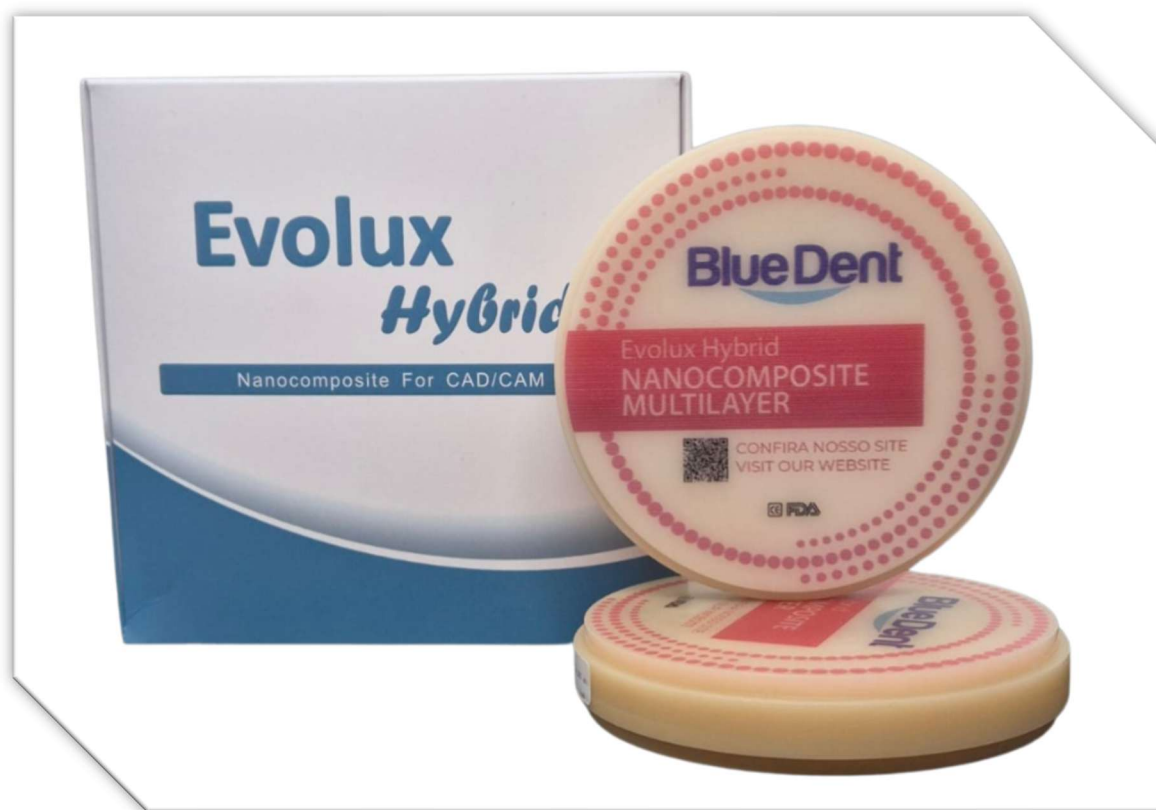

Block

VIVID BLOCK es un composite restaurador nanohíbrido para restauraciones unidades definitivas. El producto presenta fluorescencia, radiopacidad, matriz monomérica altamente soluble, polimerizado y libre de Bisfenol A (BPA Free)

NANO-HÍBRIDO:

Su composición inorgánica está compuesta por cargas silanizadas de alto rendimiento, como el vidrio de bario-aluminio en el rango de 0,4 y 0,7 μm , Nanopartículas de sílice en el rango de 35 nm, y principalmente nanosilicato de circonio. en el rango de 100 nm, que maximizan la resistencia al desgaste. La distribución uniforme de las partículas contribuye a altas propiedades mecánicas, excelente maquinabilidad, alta estética y sobre todo brillo al pulir.

Composición:

Polímeros de resina: 13 % - 43 %

Carga inorgánica: 55 % - 85 %

Aditivo: <1 %

Colorante: <1 %

Características:

**Alta estética*

**Estabilidad de color*

**Alta resistencia*

**Colores y opacidades.* Los tonos de dentina o de baja translucidez (LT) exhiben una mayor opacidad y un croma más saturado mientras que los tonos de esmalte o de alta translucidez (HT) tienen una mayor translucidez, ajustada para difundir el sustrato de dentina.

**Fuerza flexible*

Resistencia a la flexión: ≥ 157 MPa

Absorción de agua: $\leq 6 \mu\text{g}/\text{mm}^3$

Solubilidad: $\leq 2 \mu\text{g}/\text{mm}^3$

Dureza: 1,0-1,2 Gpa

La estrategia de mecanizado a elegir en CAM debe ser la de composites.

Las restauraciones se cementan a la estructura del diente o al pilar con adhesivo, cemento dental (que contiene MDP) y cemento de resina dental.



KITS DE PULIDO

KIT de pulido para acrílico K-A02



Set de pulido a base de resina, manera sencilla y directa de ajustar el acrílico sin el problema asociado con la piedra pómez.

Contenido:

- 2 modelos de fresa de carburo de tungsteno para un pulido rápido.
- 3 cabezales de pulido de silicona de diferentes tamaños para pulir en secuencia

Total 8 piezas

KIT de pulido para acrílico y resinas K-A01

Set de pulido y desbaste para terminado de acrílico, resinas, etc.


Contenido:

- 2 modelos de fresa de carburo de tungsteno
- 6 tipos de pulidores de silicona
- 4 diferentes cepillos para pulir
- Pulidor de fieltro de lana

Total 47 piezas



KIT para ajuste y pulido de alineadores K-IB01

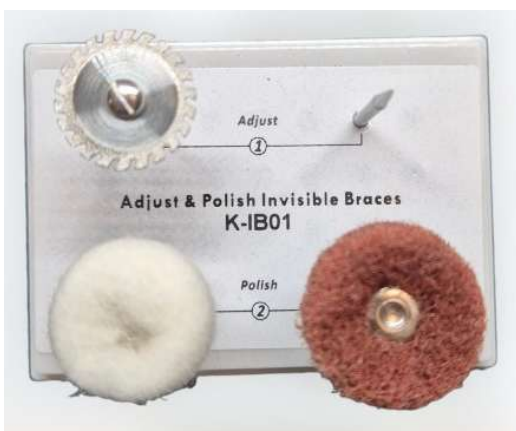

Contenido:

- 1 fresa de carburo de tungsteno
- 1 disco diamantado
- 2 cepillos para pulir

Total 4 piezas

KIT para metal K-M01

Set de desbaste y pulido para aleaciones de metal

Contenido:

- 5 fresas de diamante sinterizado
- 14 fresas de carburo de tungsteno
- 6 piedras
- 10 pulidores de silicona
- 3 rueda de goma
- 1 rueda de fieltro de lana
- 5 cepillos de pulido

Total 44 piezas



KIT de ajuste y pulido para cerámicas K-C02



Contenido:

- 1 fresa diamantada
- 1 pulidor de silicona
- 1 pulidor diamantado
- 2 cepillos para pulir

Total 5 piezas

KIT de pulido para cerámicas K-C01

Set para desbaste, pulido y terminado para cerámicas

Contenido:

- 10 fresas diamantadas
- 4 discos diamantados
- 6 piedras verdes
- 3 discos de silicón
- 8 pulidores de silicón
- 4 cepillos de pulido

Total 35 piezas



KIT de pulido para zirconia y disilicato K-Z01



Set de pulido ideal para zirconia y disilicato

Contenido:

- 4 fresas de diamante
- 2 discos de diamante
- 9 piedras diamantadas verdes
- 4 discos de pulido diamantados
- 7 hules para pulido
- 1 cepillos de pulido

Total 27 piezas


KIT de tallado y pulido para zirconia K-Z04

Set para desbaste y pulido de zirconia


Contenido:

- 2 fresas de carburo de tungsteno
- 1 disco diamantado
- 4 fresas de diamante
- 4 piedras diamantadas
- 4 pulidores diamantados

Total 15 piezas

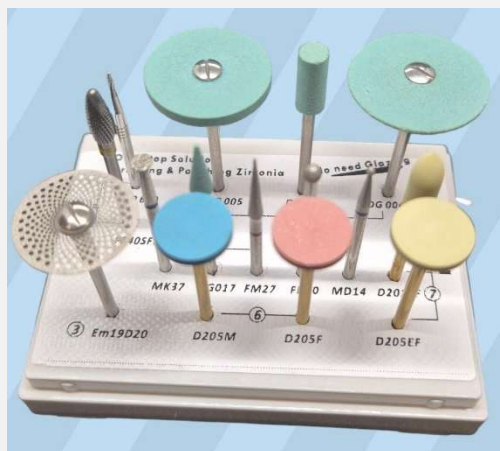

KIT de desbaste y pulido para disilicato K-LD01

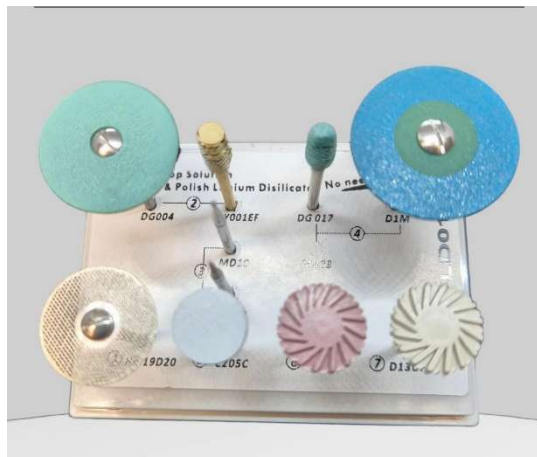

Set de desbaste y pulido para disilicato

Contenido:

- 1 disco de diamante
- 2 piedras diamantadas
- 2 fresas diamantadas
- 3 pulidores diamantados
- 2 pulidor de silicón

Total 10 piezas


KIT de tallado y pulido para zirconia K-LD02

Set para desbaste y pulido de zirconia

Contenido:

- 2 disco diamantado
- 2 piedras diamantadas
- 3 fresas de diamante
- 1 pulidor de silicón

Total 8 piezas

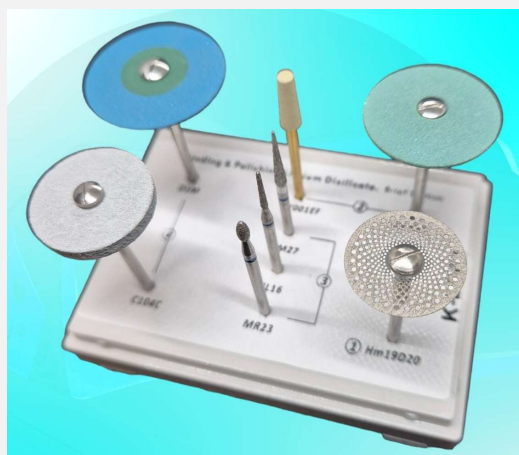

KIT de pulido para disilicato K-Z02



Hules ideales para el pulido de zirconia y disilicato, medio, fino y ultrafino


Contenido:

- 3 discos de hule diamantado

Total 3 piezas

Se utiliza para el acabado rápido y la eliminación de piezas de trabajo de zirconio, procesamiento en seco y sin calor. Suave, afilado y flexible.

Empf:7000-15000
Max:20000
Pack:1pcs/box

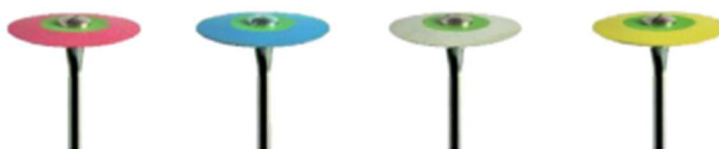

Item No.	RDH011	RDH012	RDH013	RDH014
Size	25*0.7	25*0.7	25*0.7	25*0.7

Empf:7000-15000
Max:20000
Pack:1pcs/box



Item No.	RDH021	RDH022	RDH023	RDH024	RDH025
Size	25*0.7	25*0.7	25*0.7	25*0.7	25*0.7

Empf:7000-15000
Max:20000
Pack:1pcs/box



Item No.	RDH031	RDH032	RDH033	RDH034	RDH035
Size	22*3	22*3	22*3	22*3	22*3

Size(mm):5*16
Empf:7000-15000
Max:25000
Pack:1pcs/box



Item No.	RDH064	RDH066	RDH067	RDH068	RDH069
Grit	Coarse	Medium	Fine	Extra fine	Ultra fine

Size(mm):11*6
Empf:7000-15000
Max:25000
Pack:1pcs/box



Item No.	RDH054	RDH056	RDH057	RDH058	RDH059
Grit	Coarse	Medium	Fine	Extra fine	Ultra fine

PIEDRAS

Piedra verde diamantada de grano medio.

Ideal para pulir y desbastar de una manera rápida y eficaz, no produce grietas.

Proceso en seco y sin calor.

Grit:Medium
Empf:7000-15000
Max:25000

Item No.	SDH021G	SDH031G	SDH041G	SDH051G	SDH061G
Size	4*13mm	5*13mm	7*8mm	6.5*13mm	13*7mm

\$

Grit:Medium
Empf:7000-15000
Max:25000

Item No.	SDH081G	SDH111G	SDH161G	SDH171G	SDH191G
Size	16*3.2mm	12*2mm	4*7mm	4*4mm	11*4mm

Grit:Medium
Empf:7000-15000
Max:25000

Item No.	SDH201G	SDH221G	SDH241G	SDH251G	SDH271G
Size	2.5*7mm	3*7mm	3.5*11mm	4*11mm	12*3mm

Grit:Medium
Empf:7000-12000
Max:20000

Item No.	SDH071G	SDH091G	SDH101G
Size	22*0.7mm	22*2mm	22*4.2mm



Piedra azul diamantada

Grano medio y compactado que la hace más duradera.

Ideal para pulir y desbastar de una manera rápida y eficaz, no produce grietas.

Proceso en seco y sin calor.

Grit:Medium
Empf:7000-15000
Max:25000



Item No.	SDH021	SDH031	SDH041	SDH051	SDH061
Size	4*13mm	5*13mm	7*8mm	6.5*13mm	13*7mm

Grit:Medium
Empf:7000-15000
Max:25000



Item No.	SDH081	SDH111	SDH161	SDH171	SDH191
Size	16*3.2mm	12*2mm	4*7mm	4*4mm	11*4mm

Grit:Medium
Empf:7000-15000
Max:25000




Item No.	SDH201	SDH221	SDH241	SDH251	SDH271
Size	2.5*7mm	3*7mm	3.5*11mm	4*11mm	12*3mm

Grit:Medium
Empf:7000-12000
Max:20000



Item No.	SDH071	SDH091	SDH101
Size	22*0.7mm	22*2mm	22*4.2mm

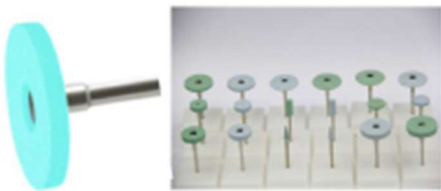

INSUMOS PARA IMPRESORA

Resina para modelos Phrozen 4k



Resina para modelos Phrozen 8k



Resina calcinable C01



Resina para provisionales JAMG HE



*Consulta colores disponibles


Resina para provisionales e sun



Alcohol isopropílico



Bote con 5 litros

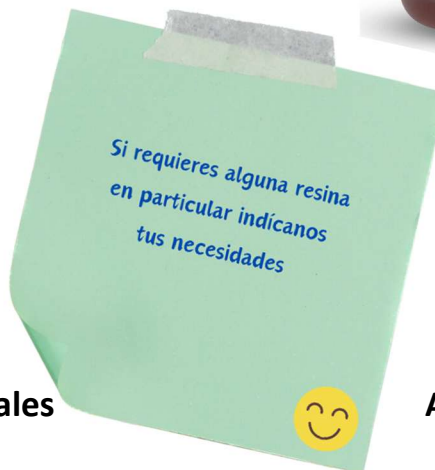

EQUIPOS



Cotiza de acuerdo a tus necesidades

COMO COMPRAR

1

Solicita una cotización con los productos que requieres

2

Una vez que aceptes, procede a realizar el pago en la cuenta asignada y envía tu comprobante al whatsapp

3

Te informaremos el día de entrega y la fletera que utilizaremos para enviar tu pedido.

Contacto:

Whatsapp: (33) 1643-3303
ventas@lorodent.mx

Datos de pago:

Titular: Grupo Loro Dent

Banco: Santander

Número de cuenta:

655 0822 3552

Clabe:

014 3206 5508 2235 529

O solicita tu liga de pago

**¡GRACIAS POR
SU COMPRA!**